

Y D M

est
2
Gキュレット / スケーラー

製造販売 株式会社YDM 埼玉県東松山市今泉28 〒355-0042
発 売 株式会社モリタ 大阪本社: 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06.6380.2525
東京本社: 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03.3834.6161
お問合せ お客様相談センター T 0800.222.8020(フリーコール)※歯科医療従事者様専用



YDM器材のメンテナンス方法
<http://www.ydm.co.jp/maintenance/maintenance.html>



商品に関するお問合せはこちら

●掲載商品の標準価格は、2021年10月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。



est
is
best.

最上級を意味するest

その名にふさわしく

より美しくシャープに

持続する切れ味

est2

国内製鉄メーカーと共同開発したYDMオリジナルの鋼材「デュアルスチール」を採用
高い切れ味と切れ味の持続性という2つの性質を兼ね備えています

ブレード/シャンクの違い

ブレード
の長さ

第1シャンク
の長さ



ハード

シャンク全体が太く作られており、しなりが少なく側方圧を加えやすいため、比較的強固な歯石や多量の歯石除去に適しています。



ソフト

しなりがあり微細な感覚が手指に伝わりやすいため、超音波スケーラー、エアスケーラー後の仕上げや細やかなSRPに適しています。


1/2



ミニ


ブレード部が小さく、第一シャンクが長くなっているため深いポケット内にも挿入しやすくなっています。またしなりが少ないため、強固な歯石にも対応できます。

ハードタイプ/ソフトタイプ

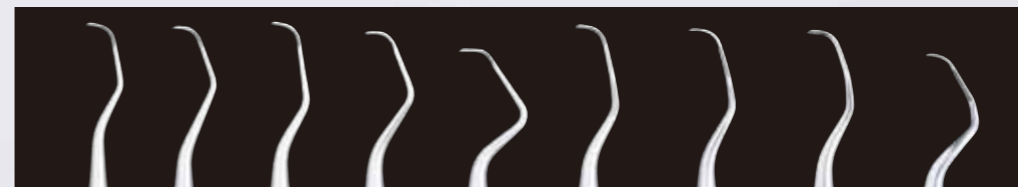

#G1-2 前歯部
#G3-4 前歯部
#G5-6 前歯部・小臼歯部
#G7-8 臼歯部頬舌面
#G9-10 臼歯部頬舌面
#G11-12 臼歯部近心面
#G13-14 臼歯部遠心面
#G15-16 臼歯部近心面
#G17-18 臼歯部遠心面
根分枝部



ミニタイプ

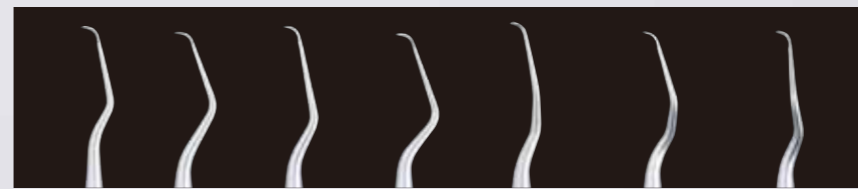

#G1-2 前歯部
#G3-4 前歯部
#G5-6 前歯部・小臼歯部
#G7-8 臼歯部頬舌面
#G11-12 臼歯部近心面
#G13-14 臼歯部遠心面
#G15-16 臼歯部近心面

Sakura サクラ

サクラ模様は見た目だけではなく、滑り止めの効果も考えてデザインしています。
 ハンドルは持ちやすく圧を加えやすい太さになっており、
 中空構造による軽量化で疲労感も少なく感じられます。

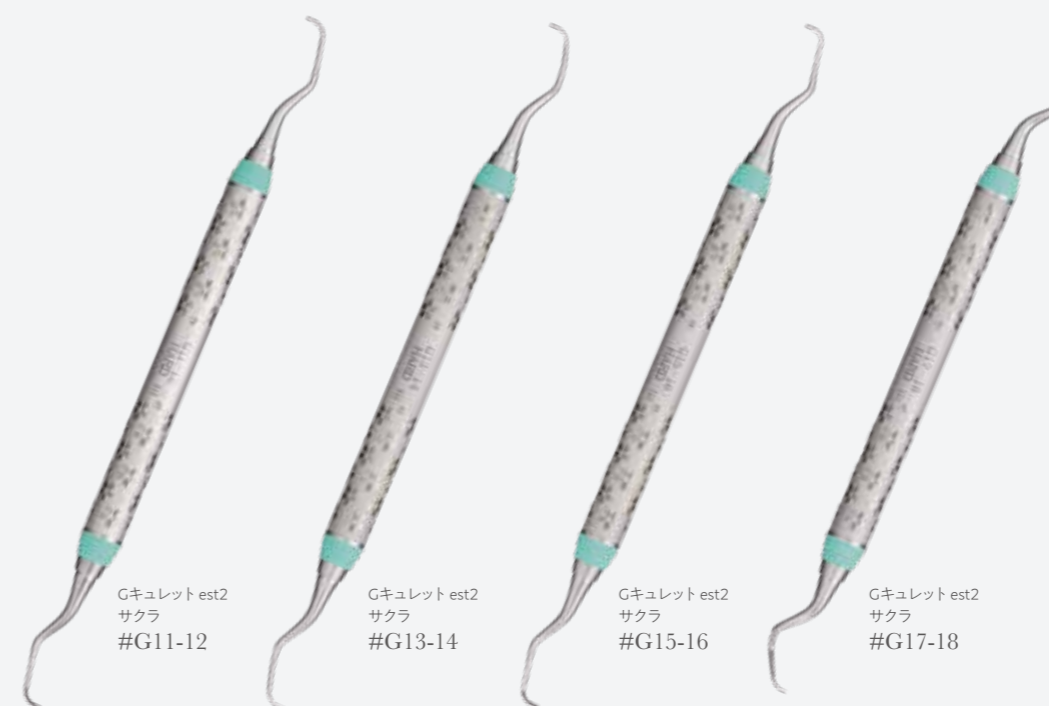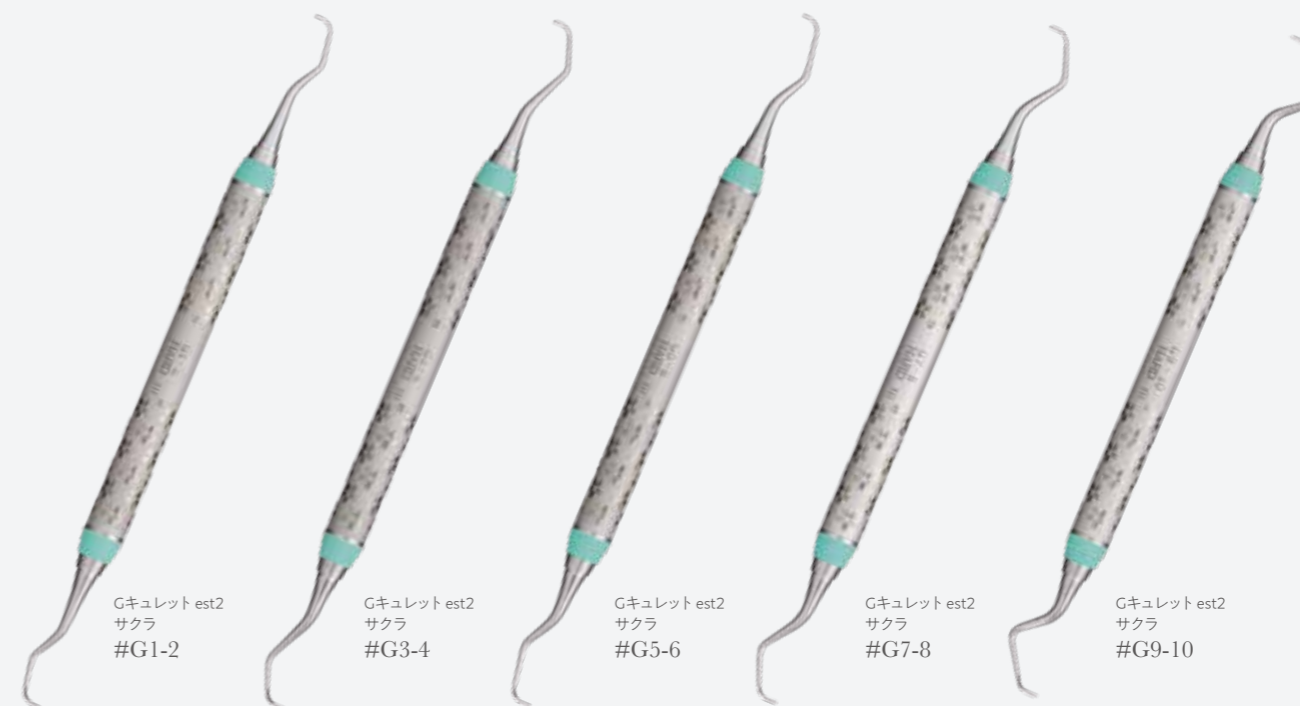

※出荷時のIDリングは、ハード:グリーン、ソフト:ピンク、ミニ:ブルーとなります。
 ※IDリング耐熱温度 260℃

一般的名称: 歯周用キュレット 販売名: Gキュレット est 医療機器届出番号: 11B1X1000662D108 医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI)

Colorpie カラフィー

カラフルな色・見やすい規格表示で目的のインスツルメントを明確に識別できます。
 ハンドル表面はシリコン加工を行うことで手にフィットしやすく滑りにくくなっています。
 また凹凸が少ないので洗浄しやすい形状になっています。



※材質 Si 耐熱温度 260℃

一般的名称: 歯周用キュレット 販売名: Gキュレット est 医療機器届出番号: 11B1X1000662D108 医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI)

Toiro トイロ

シリコン加工とグリップ部分の凹凸により滑りにくくフィット感に優れた構造になっています。

シリコンハンドルは長時間の使用でも疲れにくく、また、カラフルなハンドルはやさしい印象を与えます。




※材質 Si 耐熱温度 260℃

一般的名称: 歯周用キュレット 販売名: Gキュレット est 医療機器届出番号: 11B1X1000662D108 医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI)



Manue 丸柄

ハンドル部分が短く、マイクロスコープを使用した施術に適用できます。
つや消しハンドルでライトが当たった時の反射が軽減されます。

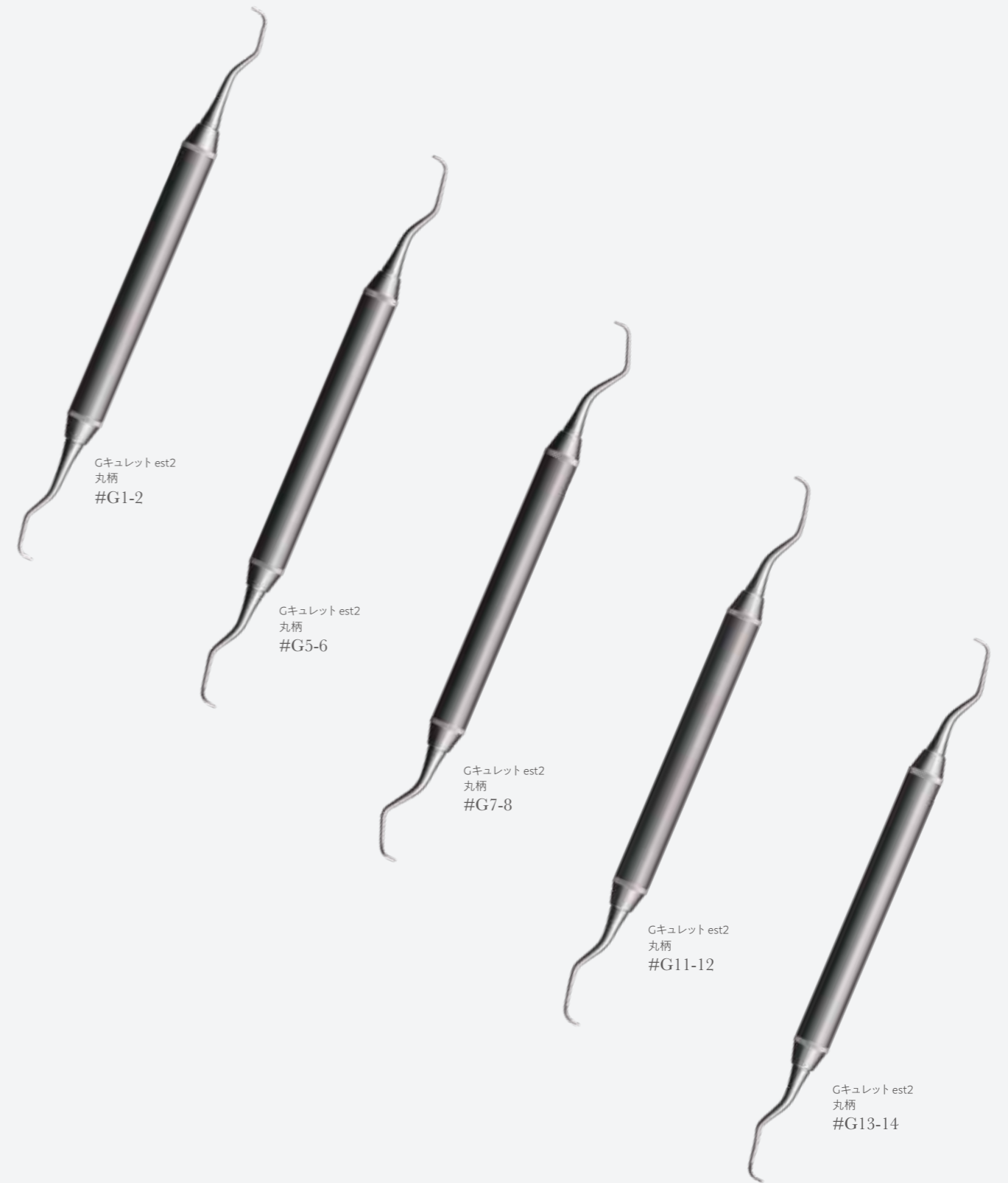

Kakue 角柄

ハンドルが細く、先端部分の感覚が手指に伝わりやすいため、
 細かな縁下歯石の探知に適しています。

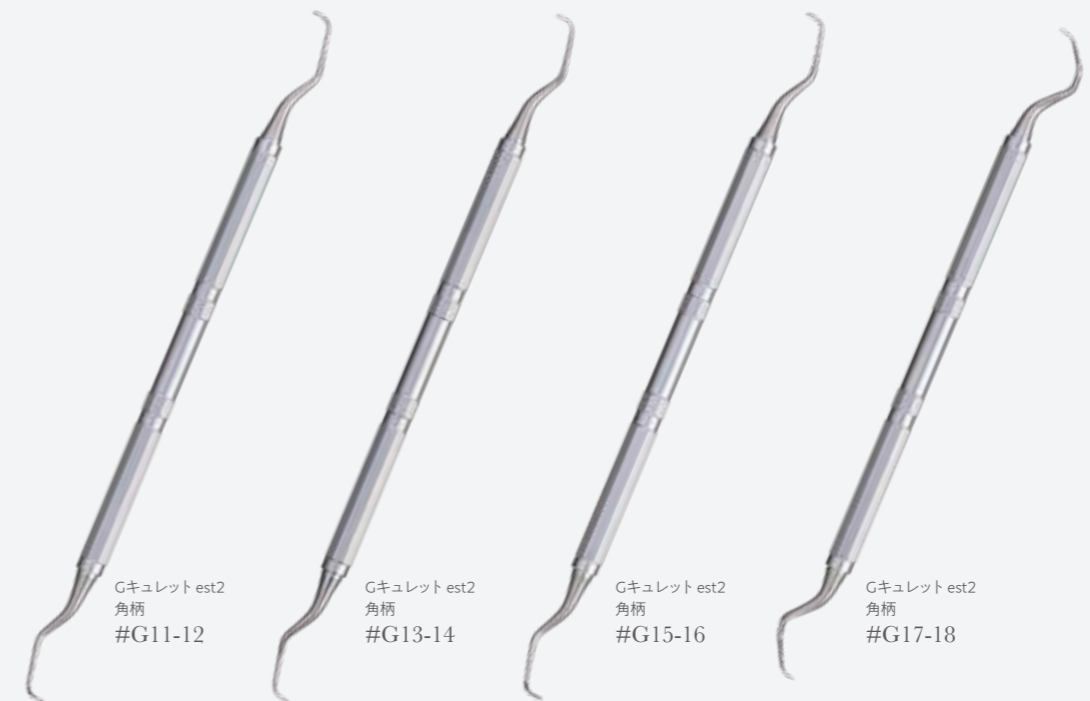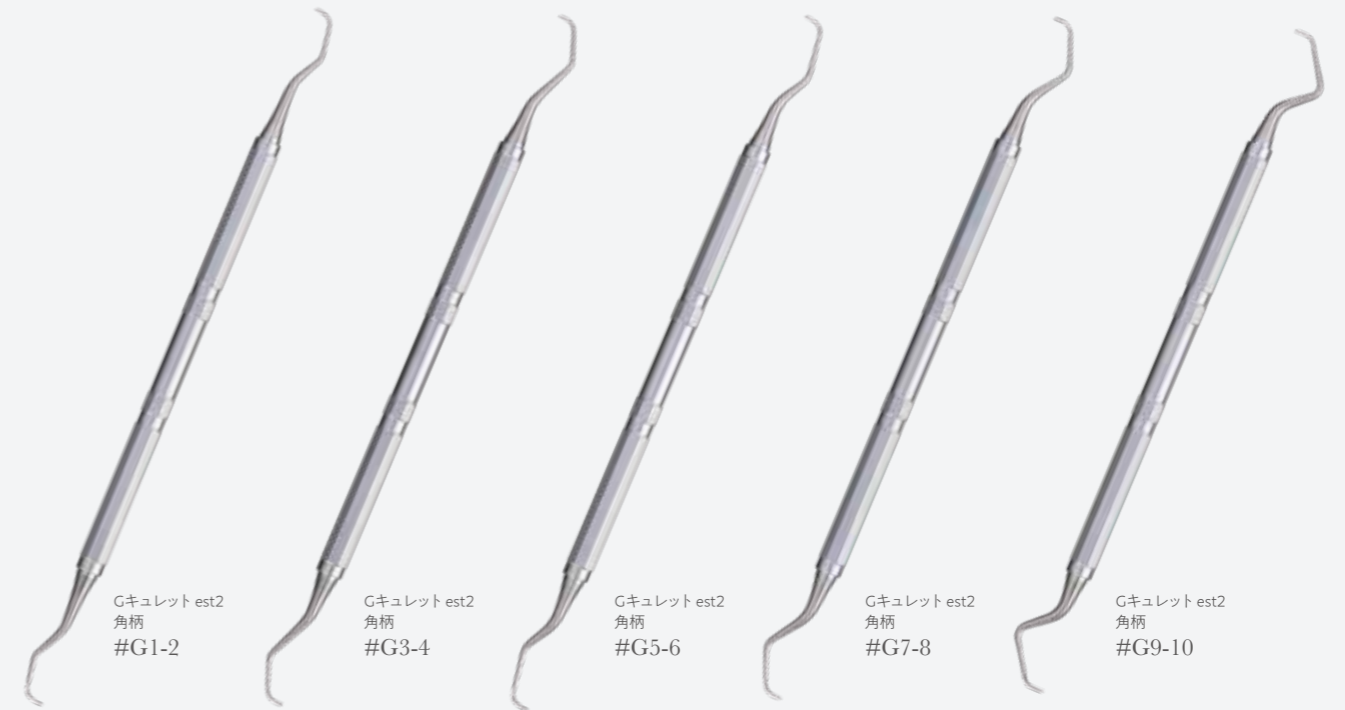

Scaler スケーラー


さまざまなラインナップのスクーラーをご用意しております。



スクーラー est2 Slim



シクルのブレード部は細く、細部のスクーリングに適しています。

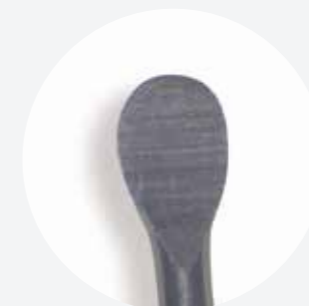

スプーン型のブレードは歯面(口蓋側や舌側面)に沿わせることで、歯石やステインの除去を行います。



スクーラー est KIRIKO

KIRIKOハンドル

日本の伝統品である“江戸切子”をモチーフにし、見た目の美しさだけでなく、“持ちやすく滑りにくい”という特長も兼ね備えています。



シクルスクーラー est
KIRIKO
H5/33

シクルスクーラー est
KIRIKO
H6/H7


スケーラー est2 #H5/33、#H6/H7

#H5/33: 直と曲の薄いブレードの組み合わせです。前歯歯頸部や歯間部の歯肉縁上スケーリングに適しています。
 #H6/H7: シャンクが左右にわずかに傾いています。前歯部から臼歯部の近遠心隅角部までアプローチできます。



スケーラーest2 #204SD

ブレード部が小さく、シャンク部の複屈曲デザインにより、臼歯部隣接面へのアプローチがしやすくなります。
 縁上スケーリングにおける超音波スケーラー、エアースケーラー使用後の仕上げに適しています。

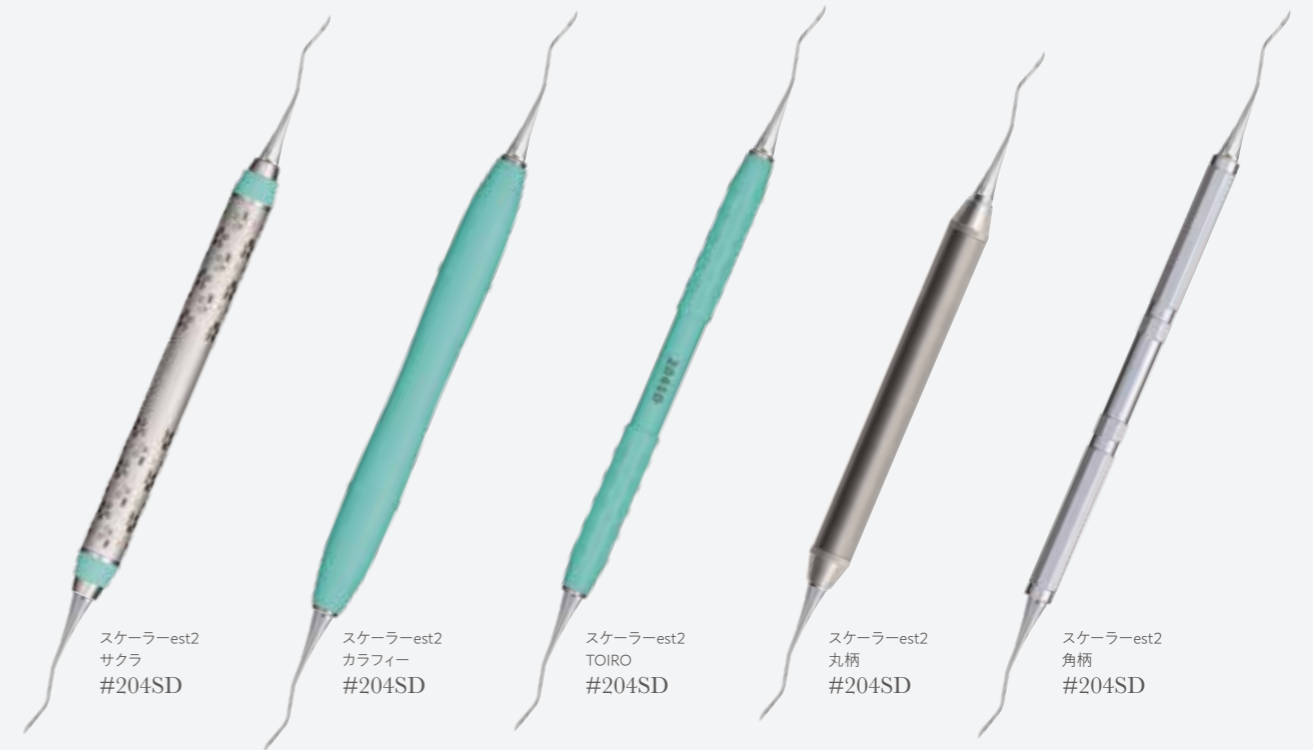

IDリング(サクラ・KIRIKOハンドル専用)

お好みの色を選択し、オリジナルのハンドルとして使用できます。
 IDリングを付け替えることで、識別しやすくなります。



※耐熱温度260℃

Gキュレット

商品名	規格	品目コード	標準価格		
Gキュレットest2 サクラ	ハード (IDリング: グリーン)	#G1-2	2010108061-2	5,700円	
		#G3-4	2010108063-4		
		#G5-6	2010108065-6		
		#G7-8	2010108067-8		
		#G9-10	2010108069-10		
		#G11-12	20101080611-12		
		#G13-14	20101080613-14		
		#G15-16	20101080615-16		
		#G17-18	20101080617-18		
	ソフト (IDリング: ピンク)	#G1-2	2010108071-2	5,700円	
		#G3-4	2010108073-4		
		#G5-6	2010108075-6		
		#G7-8	2010108077-8		
		#G9-10	2010108079-10		
		#G11-12	20101080711-12		
		#G13-14	20101080713-14		
		#G15-16	20101080715-16		
		#G17-18	20101080717-18		
	ミニ (IDリング: ブルー)	#G1-2	2010108081-2	5,700円	
		#G3-4	2010108083-4		
		#G5-6	2010108085-6		
		#G7-8	2010108087-8		
		#G11-12	20101080811-12		
		#G13-14	20101080813-14		
		#G15-16	20101080815-16		
		#G1-2	2010108091-2		5,400円
		#G3-4	2010108093-4		
#G5-6	2010108095-6				
#G7-8	2010108097-8				
#G9-10	2010108099-10				
#G11-12	20101080911-12				
#G13-14	20101080913-14				
#G15-16	20101080915-16				
#G17-18	20101080917-18				
ソフト	#G1-2	2010108101-2	5,400円		
	#G3-4	2010108103-4			
	#G5-6	2010108105-6			
	#G7-8	2010108107-8			
	#G9-10	2010108109-10			
	#G11-12	20101081011-12			
	#G13-14	20101081013-14			
	#G15-16	20101081015-16			
	#G17-18	20101081017-18			
ミニ	#G1-2	2010108111-2	5,400円		
	#G3-4	2010108113-4			
	#G5-6	2010108115-6			
	#G7-8	2010108117-8			
	#G11-12	20101081111-12			
	#G13-14	20101081113-14			
	#G15-16	20101081115-16			
	#G1-2	2010108151-2		4,800円	
	#G5-6	2010108155-6			
#G7-8	2010108157-8				
#G11-12	20101081511-12				
#G13-14	20101081513-14				
#G1-2	2010108161-2	4,800円			
#G5-6	2010108165-6				
#G7-8	2010108167-8				
#G11-12	20101081611-12				
#G13-14	20101081613-14				
#G1-2	2010108171-2		4,800円		
#G5-6	2010108175-6				
#G7-8	2010108177-8				
#G11-12	20101081711-12				
#G13-14	20101081713-14				
ハード	#G1-2	2010108121-2		4,800円	
	#G5-6	2010108125-6			
	#G7-8	2010108127-8			
	#G11-12	20101081211-12			
	#G13-14	20101081213-14			
	ソフト	#G1-2	2010108131-2		4,800円
		#G5-6	2010108135-6		
		#G7-8	2010108137-8		
		#G11-12	20101081311-12		
#G13-14		20101081313-14			
ミニ		#G1-2	2010108141-2	4,800円	
		#G5-6	2010108145-6		
		#G7-8	2010108147-8		
		#G11-12	20101081411-12		
	#G13-14	20101081413-14			

Gキュレット

商品名	規格	品目コード	標準価格	
Gキュレットest2 角柄	ハード	#G1-2	2010108181-2	4,500円
		#G3-4	2010108183-4	
		#G5-6	2010108185-6	
		#G7-8	2010108187-8	
		#G9-10	2010108189-10	
		#G11-12	20101081811-12	
		#G13-14	20101081813-14	
		#G15-16	20101081815-16	
		#G17-18	20101081817-18	
	ソフト	#G1-2	2010108191-2	4,500円
		#G3-4	2010108193-4	
		#G5-6	2010108195-6	
		#G7-8	2010108197-8	
		#G9-10	2010108199-10	
		#G11-12	20101081911-12	
		#G13-14	20101081913-14	
		#G15-16	20101081915-16	
		#G17-18	20101081917-18	
	ミニ	#G1-2	2010108201-2	4,500円
		#G3-4	2010108203-4	
		#G5-6	2010108205-6	
		#G7-8	2010108207-8	
		#G11-12	20101082011-12	
		#G13-14	20101082013-14	
		#G15-16	20101082015-16	

スケーラー

商品名	規格	品目コード	標準価格
スケーラーest2 Slim	#前歯用	201010836	4,800円
スケーラーest KIRIKO	#5 / 33	201510755	4,800円
	#H6 / H7	201510756	
スケーラーest2 サクラ	#H5 / 33	201010821	5,700円
	#H6 / H7	201010822	
スケーラーest2 カラフィー	#H5 / 33	201010823	5,400円
	#H6 / H7	201010824	
スケーラーest2 TOIRO	#H5 / 33	201010827	4,800円
	#H6 / H7	201010828	
スケーラーest2 丸柄	#H5 / 33	201010825	4,800円
	#H6 / H7	201010826	
スケーラーest2 角柄	#H5 / 33	201010829	4,500円
	#H6 / H7	201010830	
スケーラーest2 サクラ	#204SD	201010831	5,700円
スケーラーest2 カラフィー	#204SD	201010832	5,400円
スケーラーest2 TOIRO	#204SD	201010834	4,800円
スケーラーest2 丸柄	#204SD	201010833	4,800円
スケーラーest2 角柄	#204SD	201010835	4,500円

IDリング

商品名	品目コード	標準価格	
IDリング サクラ、KIRIKOハンドル専用	アソート 18 入	201510753	2,880円
	バイオレット 10 入	201510754V	1,600円
	オレンジ 10 入	201510754O	
	イエロー 10 入	201510754Y	
	ブルー 10 入	201510754BL	
	レッド 10 入	201510754R	
	ピンク 10 入	201510754P	
	グリーン 10 入	201510754G	
	ネイビー 10 入	201510754NAV	
	ライム 10 入	201510754LIM	